


Concept architectural multifonction COLIBRI

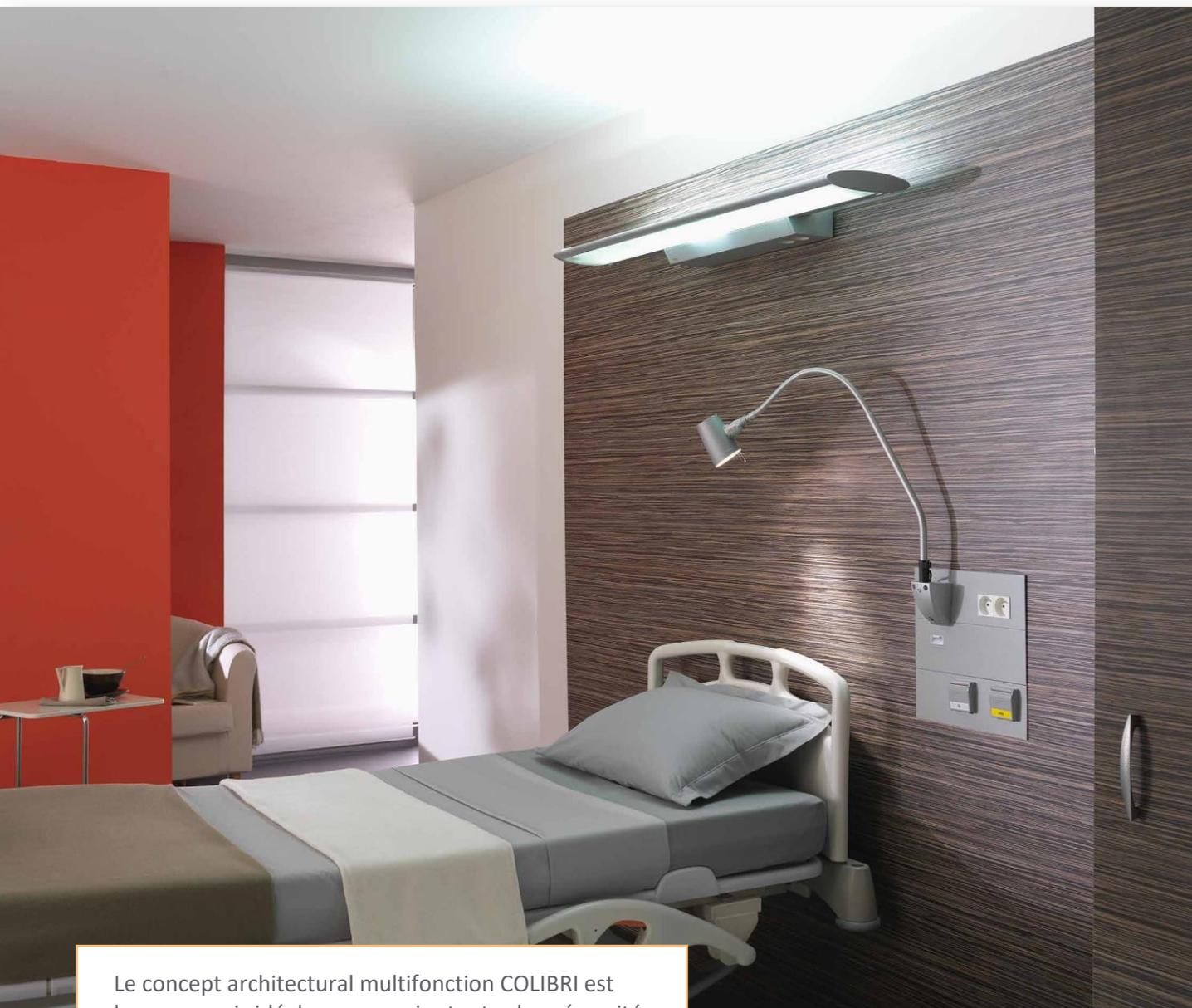

Le concept architectural multifonction COLIBRI est le compromis idéal pour associer toutes les nécessités techniques utiles à un poste de soins, des éclairages confortables et ergonomiques derrière un design haut de gamme réservé aux meilleurs hôtels mais appliqué aux établissements de santé.




ÉCLAIRAGES

Les éclairages d'ambiance, de lecture et de soins constituent les fondamentaux du confort hôtelier et de l'ergonomie hospitalière.

Nous proposons 2 gammes d'appliques au design moderne et épuré, tout aluminium, avec équipements fluorescents ou LED.

Les évolutions techniques de la LED ont contribué à élargir notre offre par des options de gradation, cycle circadien, optimisation par détection de présence et apport d'éclairage naturel.

L'applique peut être complétée par un éclairage veille en pied de panneau ou en ruban sur la largeur du panneau.

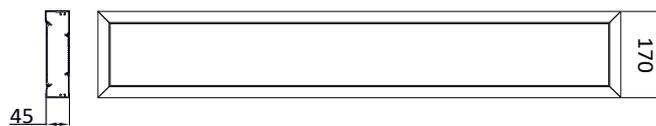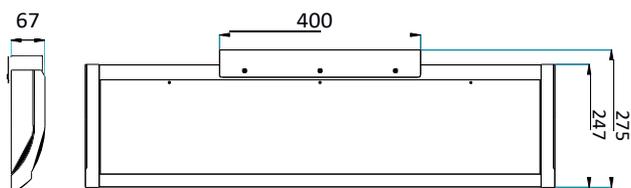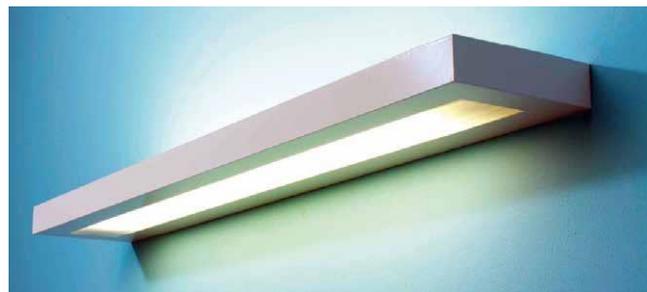

	Longueur (mm)
CERAH 50	1 235
CERAH 40	935
CERAH 20	495

	Longueur (mm)
MUSSE 50	1 320
MUSSE 40	1 020

	Longueur (mm)	Indirect	Lecture	Soins	Poids	Gris
Cérah 50	1235	54w	54w (50%)*	3x54w	5kg	VEC0550
Cérah 50 Eco	1235	54w	54w	A + L	5kg	VEC0546
Cérah 40	935	2x39w	39w (50%)*	3x39w	4kg	VEC0551
Cérah 40 LED	935	2x39w	12w LED	A + L	4kg	VEC0549
Cérah 40 Eco	935	2x39w	39w	A + L	4kg	VEC0547
Cérah 20	495	2x36w			2,5kg	VEC0552

*% de gradation de la lampe

	Longueur (mm)	Indirect	Lecture	Soins	Poids	Gris	Blanc
Musse 50	1320	2x54w	54w (50%)*	3x54w	4kg	VEC0565	VEC0564
Musse 50 Eco	1320	2x54w	54w	A + L	4kg	VEC0569	VEC0568
Musse 40	1020	2x39w	39w (50%)*	3x39w	3,5kg	VEC0563	VEC0562
Musse 40 LED	1020	2x39w	12w LED	A + L	3,8kg	VEC0570	VEC0571
Musse 40 Eco	1020	2x39w	39w	A + L	3,5kg	VEC0567	VEC0566



*% de gradation de la lampe



PANNEAUX

Les panneaux sont amovibles pour un accès ultérieur et laissent libre passage aux arrivées électriques et fluides médicaux comme l'impose la norme. Les panneaux sont ventilés pour les fluides médicaux.

Une structure métallique aluminium fixée au mur reçoit les étaux réglables des panneaux. Un étau dispose d'une vis de sécurité pour éviter tout déboitement accidentel. Les réglages permettent un parfait ajustement des panneaux par rapport à la gaine quel que soit la planéité des murs.

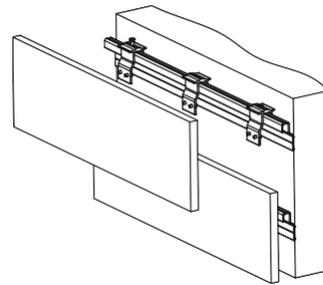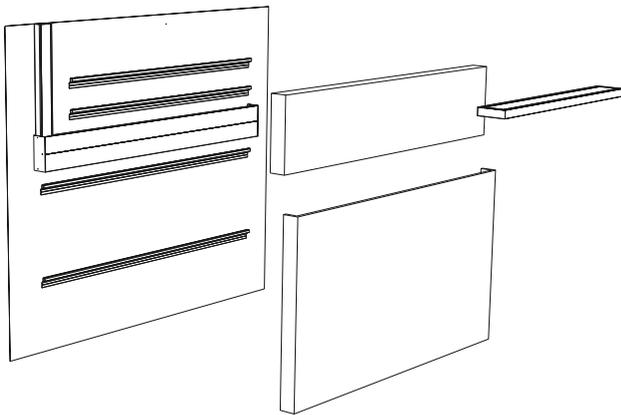

Patte de fixation



Le procédé autorise une complète créativité dans les dimensions des panneaux.

Les lisses latérales sont solidaires et ajustées aux panneaux. Les lisses hautes et basses sont démontables pour les accès aux réglages.



Version 1 coffret hébergement
par un panneau de 200 x 170 cm



Version 2 coffrets soins intensifs
par un panneau de 200 x 170 cm



L'encastrement de la gaine technique est conçu pour être sur le même plan que le panneau pour des raisons d'hygiène et esthétique.

Les gaines techniques encastrées sont des dispositifs médicaux de Classe IIb respectueux des règles de sécurité électrique et fluides médicaux.

MENUISERIE

Nous sommes menuisiers agenceurs avec nos ateliers Résinor depuis 2010, proposant un savoir faire à vos mesures et des prix de fabricant.

Nous pouvons étendre nos agencements aux armoires de bureau environnantes pour une parfaite uniformité.

Nos équipes de poseurs qualifiés compléteront efficacement ces prestations.



Personnalisez votre décor parmi plus de 250 surfaces graphiques et incrustations de photo sur un support stratifié inaltérable.

Les panneaux sont proposés en 3 qualités (mélaminé, stratifié ou composant HPL) en version M1 et/ou antibactérienne.

Nous proposons de très nombreuses finitions (unies, bois, métal etc...) parmi les plus grands fabricants mondiaux du marché.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe électrique : classe I selon NF EN 60601-1.
- Indice de protection IP20.
- Tenue au fil incandescent : 850°C selon norme NF EN 60695-2-11.
- Finition peinture époxy RAL 9016 Blanc ou Gris aluminium.
- Matériaux : aluminium, panneaux stratifiés ou mélaminés.
- Emballage carton + cellophane + caisse bois.
- Fixation murale sur structure métallique.
- Nettoyage et désinfection au chiffon doux et désinfectant.

