


COLONNE VERTICALE BLUE BEETLE



Le concept BLUE BEETLE associe une colonne verticale distribuant les équipements électriques latéralement et les fluides médicaux en façade, élégamment habillée, et une applique design pour un éclairage confortable et multi-fonctionnel.

COLONNE VERTICALE BLUE BEETLE

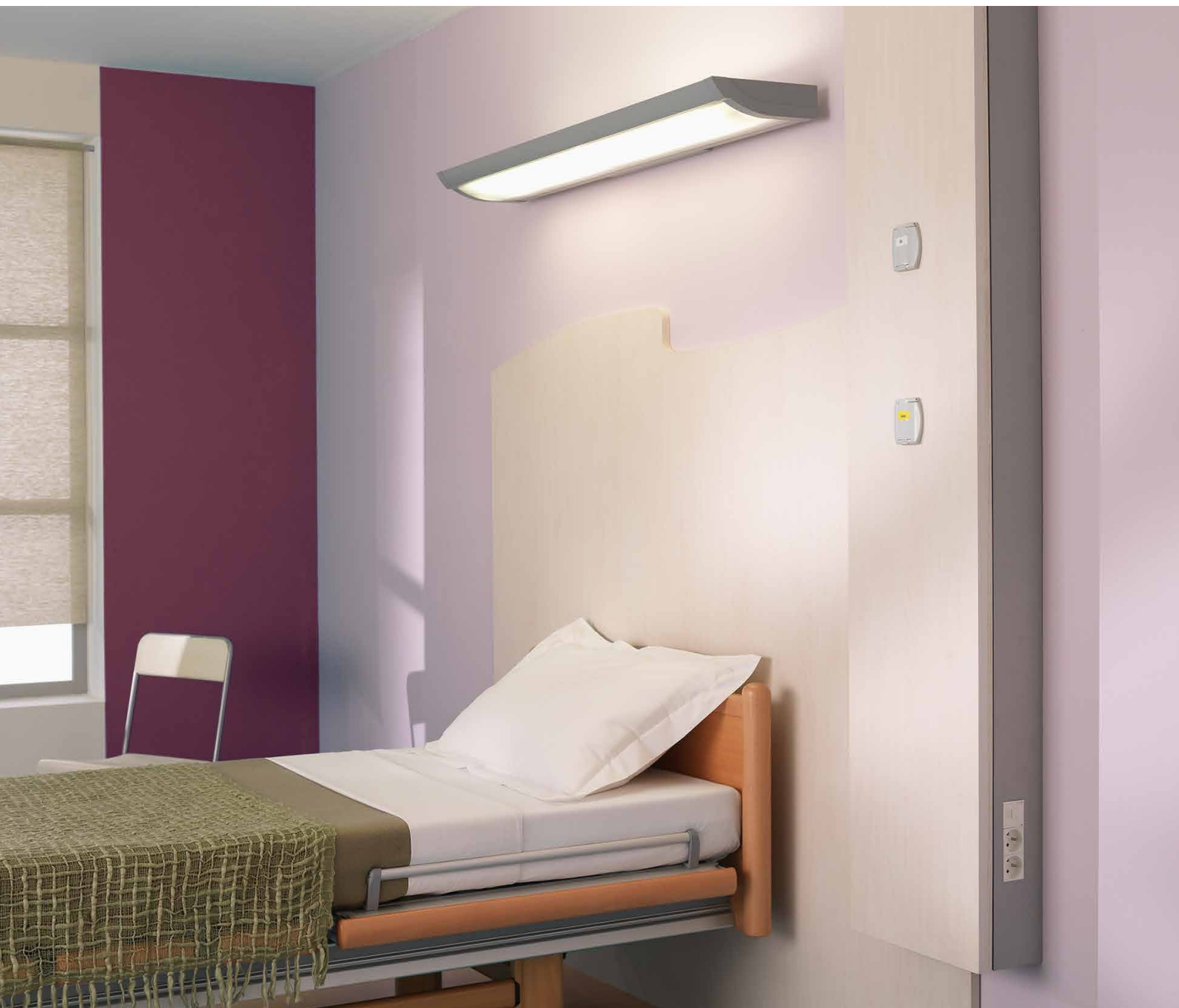

La colonne BLUE BEETLE adopte le principe de la distribution verticale des fluides nécessaire aux postes de soins.

- Un ensemble de 2 profilés aluminium latéraux compartimentés (peut être remplacé par une lisse en bois unilatérale) fermé par un panneau bois mélaminé ou stratifié toute hauteur et clippé sur les supports muraux.

L'ensemble part du sol à une hauteur de 400 mm et se termine au ras du faux plafond pour un cheminement des alimentations fluides et électriques visitables derrière la panneau.



- Une section «médicalisée» à une hauteur de 1m40 environ reçoit les prises fluides en face avant sur une ou 2 colonnes selon le nombre de prises utilisées.
Les accessoires électriques sont disposés sur les gaines aluminium latérales.

- Un éclairage veille à LED peut y être intégré en sous face de la colonne.

- Une façade par panneau mélaminé ou stratifié particulièrement résistant aux chocs.

Un choix de plus de 250 finitions disponibles.



Une liaison électrique (jarretière) peut être envisagée avec une connectique débrochable entre la colonne et le luminaire.

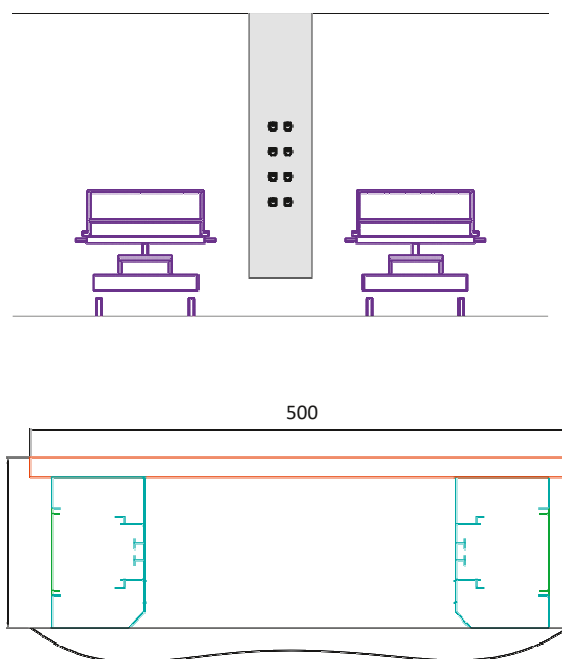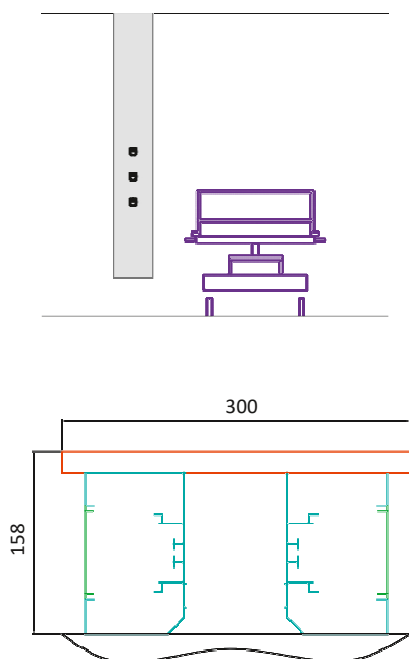

COLONNE VERTICALE BLUE BEETLE

ÉCLAIRAGE

Le concept BLUE BEETLE intègre un boîtier fluides médicaux et électricité marqué CE Médical, et une applique éclairage direct/indirect de notre gamme : CERAH et MUSSE.

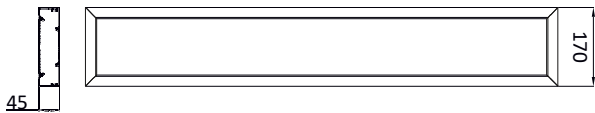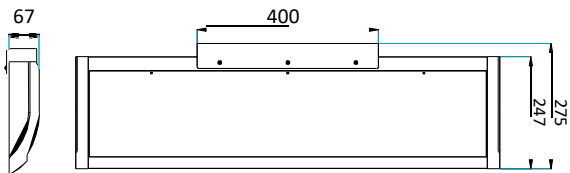

	Longueur (mm)
CERAH 50	1 235
CERAH 40	935
CERAH 20	495

	Longueur (mm)
MUSSE 50	1 320
MUSSE 40	1 020

	Longueur (mm)	Indirect	Lecture	Soins	Poids	Gris
Cérah 50	1235	54w	54w (50%)*	3x54w	5kg	VEC0550
Cérah 50 Eco	1235	54w	54w	A + L	5kg	VEC0546
Cérah 40	935	2x39w	39w (50%)*	3x39w	4kg	VEC0551
Cérah 40 LED	935	2x39w	12w LED	A + L	4kg	VEC0549
Cérah 40 Eco	935	2x39w	39w	A + L	4kg	VEC0547
Cérah 20	495	2x36w			2,5kg	VEC0552

*% de gradation de la lampe

	Longueur (mm)	Indirect	Lecture	Soins	Poids	Gris	Blanc
Musse 50	1320	2x54w	54w (50%)*	3x54w	4kg	VEC0565	VEC0564
Musse 50 Eco	1320	2x54w	54w	A + L	4kg	VEC0569	VEC0568
Musse 40	1020	2x39w	39w (50%)*	3x39w	3,5kg	VEC0563	VEC0562
Musse 40 LED	1020	2x39w	12w LED	A + L	3,8kg	VEC0570	VEC0571
Musse 40 Eco	1020	2x39w	39w	A + L	3,5kg	VEC0567	VEC0566

*% de gradation de la lampe



FINITIONS

Nous sommes menuisiers agenceurs avec nos ateliers Résinor depuis 2010, proposant un savoir faire à vos mesures et des prix de fabricant.

Nous pouvons étendre nos agencements aux armoires de bureau environnantes pour une parfaite uniformité.

Nos équipes de poseurs qualifiés complèteront efficacement ces prestations.



Personnalisez votre décor parmi plus de 250 surfaces graphiques et incrustations de photo sur un support stratifié inaltérable.

Les panneaux sont proposés en 3 qualités (mélaminé, stratifié ou composant HPL) en version M1 et/ou antibactérienne.

Nous proposons de très nombreuses finitions (unies, bois, métal etc...) parmi les plus grands fabricants mondiaux du marché.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classe électrique : classe I selon NF EN 60601-1.
- Indice de protection IP20.
- Tenue au fil incandescent : 850°C selon norme NF EN 60695-2-11.
- Finition peinture époxy RAL 9016 Blanc ou Gris aluminium sur les gaines latérales.
- Matériaux : aluminium, panneaux stratifiés ou mélaminés.
- Poids moyen : 4,5 kg environ.
- Emballage carton + cellophane + caisse bois.
- Fixation murale par cheville appropriée au support.
- Nettoyage et désinfection au chiffon doux et désinfectant.

