


BANDEAU TÊTE DE LIT BIOLED



Ce bandeau tête de lit esthétique est adapté à la chambre médicalisée. Possibilité de finition RAL (peinture époxy) sur le profilé aluminium.

COMPOSITION BANDEAU TÊTE DE LIT

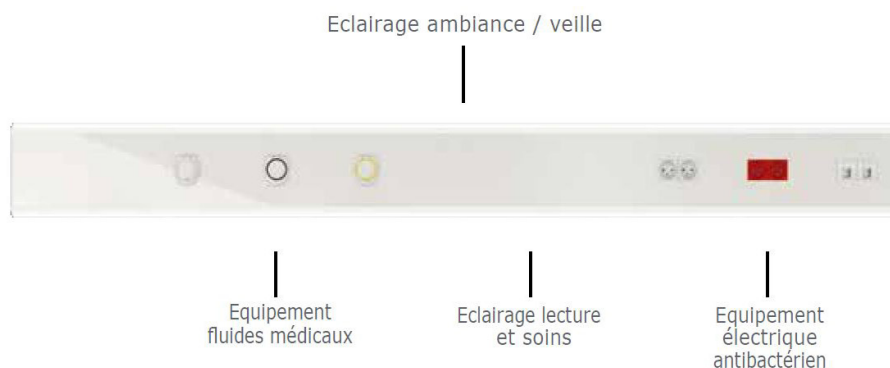

ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES

- Equipements électriques antibactériens
- Conformes aux normes internationales (type LEGRAND)
- Raccordement des câblages sur bornes WAGO
- Couvercle monobloc mis à la terre par câble (aluminium peint)
- Conception modulaire sur l'ensemble du bandeau
- Fixation des équipements fluides et électriques en fond de gaine et isolation des accessoires électriques par boîte isolante
- Séparation des courants forts, faibles et fluides médicaux


FLUIDES MÉDICAUX

- Possibilité d'intégration des prises fluides de toutes marques
- Fixation sur étriers inox
- Couvercle en fonte d'aluminium laqué blanc en option
- Compartiment fluides ventilés

ÉCLAIRAGE LED

- Encastrément des modules LED derrière une vasque polycarbonate incassable opalisée
- Éclairage d'ambiance 6500 lumens sur 1520 mm - 4000 °k - IRC > 85
- Éclairage direct de lecture 2300 lumens sur 545 mm - 3000 °k
- Equipements électroniques et convertisseurs LED. Fonctionnement des éclairages sur interrupteur sur gaine (50 000 heures)
- Eclairage de veille optionnel

PROFILÉ ALUMINIUM

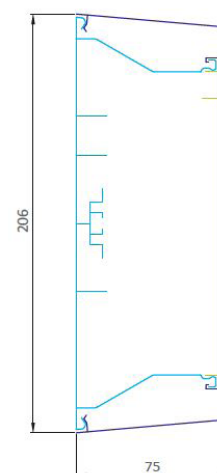


Section 206 mm x 75 mm

BANDEAU TÊTE DE LIT BIOLED

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT

BIOLED									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Indirect	280	245	160	170	160	140	170	160	140
Direct	495	90	30	55	35	25	55	35	25
Soins	760	330	185	225	200	145	225	200	145


Modules LED: 8010 lm

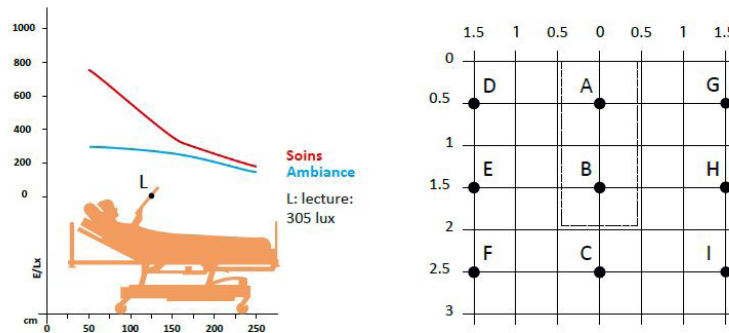

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dispositif médical : Classe I
- Construction conforme à la norme EN 11197 - Avril 2016 « Gaines techniques à usage médical »
- Eclairages conformes à la norme NF EN 12464-1 et recommandations AFE Février 2000
- Installations des fluides médicaux selon la norme en vigueur
- Classe électrique : classe 1 selon NF EN 60601-1
- Indice de protection IP20
- Emballage carton + film plastique
- Tenue au fil incandescent : 850°C selon norme NF EN 60 695-2-11
- Finition peinture époxy RAL 9016 Blanc
- Matériaux : aluminium et polycarbonate
- Poids moyen : 8 kg/ml (selon équipement)
- Fixation murale par cheville appropriée au support et désinfectant
- Blanc Mat RAL 9016

PLAN TYPE

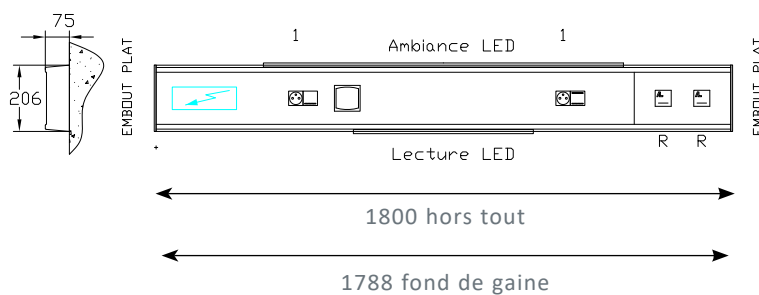

COMMANDES OPTIONNELLES

- Manipulateur / Appel malade

